


THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Programa de puntas para piezas
de mano ultrasónicas


Variedad excelente, calidad
hasta el último detalle

dentsplysirona.com

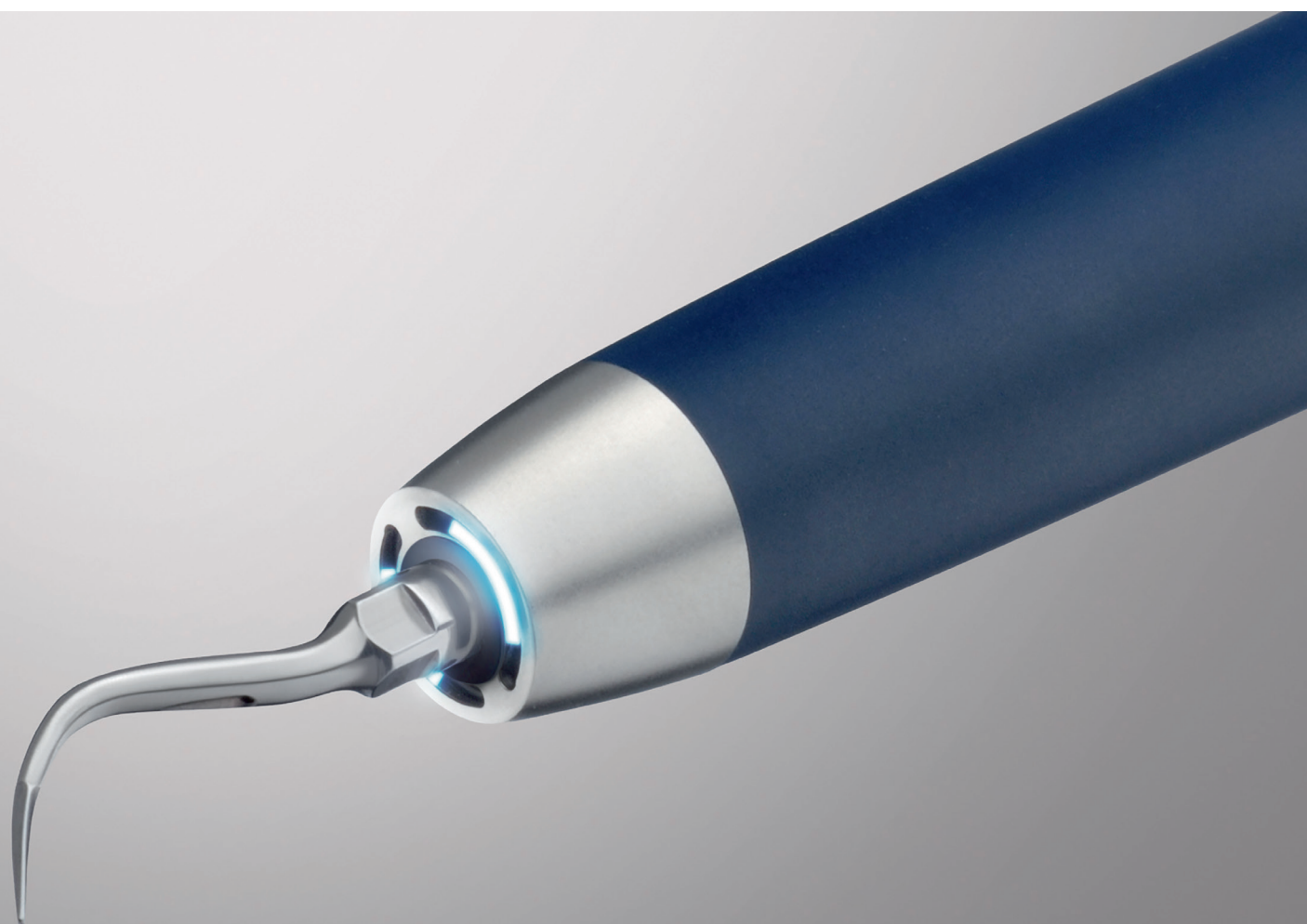

Puntas y escaladores ultrasónicos en calidad de marca

En la unión está la fuerza: El requisito indispensable para un trabajo ideal – independientemente del tratamiento a realizar – es la combinación ideal del escalador y la punta. Dentsply Sirona ha armonizado con precisión ambos elementos para ofrecer una alta calidad constante. El resultado: escaladores ultrasónicos flexibles y cómodos y una selección de puntas con alta capacidad de diferenciación en las diferentes áreas de tratamiento.

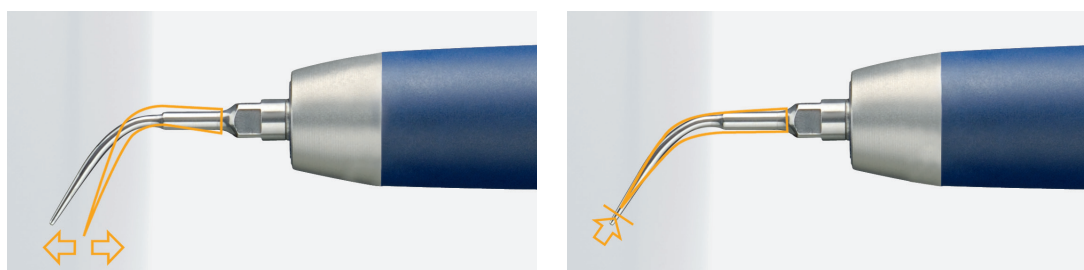


Hacia arriba y hacia abajo. Hacia delante y hacia atrás. La oscilación bidimensional protege el diente a tratar.

SiroSonic/L/TL – El gran objetivo: Flexibilidad integrada directamente en el elemento odontológico

Las piezas de manos ultrasónicas SiroSonic/SiroSonic L y SiroSonic TL con potente iluminación anular sin instrumentos ideales para numerosos ámbitos de aplicación en la consulta dental moderna. Gracias a su fiable regulación de potencia, el odontólogo puede tanto realizar tratamientos periodontales sumamente sensibles como emplear el instrumento en micropreparaciones. Además, en las dos piezas de mano es posible suministrar un líquido externo de enjuague (p.ej. solución NaOCl o CHX) con ayuda de un adaptador externo de spray.

Trabajo seguro

Esto solo puede ofrecérselo Dentsply Sirona: Todas las puntas cuentan con una desviación óptima de la oscilación, adaptada de forma individual a las necesidades específicas de cada área de tratamiento. Las oscilaciones de las puntas del escalador y PA presentan una progresión, p.ej. en un plano bidimensional o en un único plano. Se evitan los desplazamientos laterales y el diente que se somete a la terapia se protege de forma efectiva. El grado de desgaste de la punta influye en la eficacia de abrasión. Para comprobar de forma rápida y sencilla el estado de la punta, emplee un calibrador de puntas.

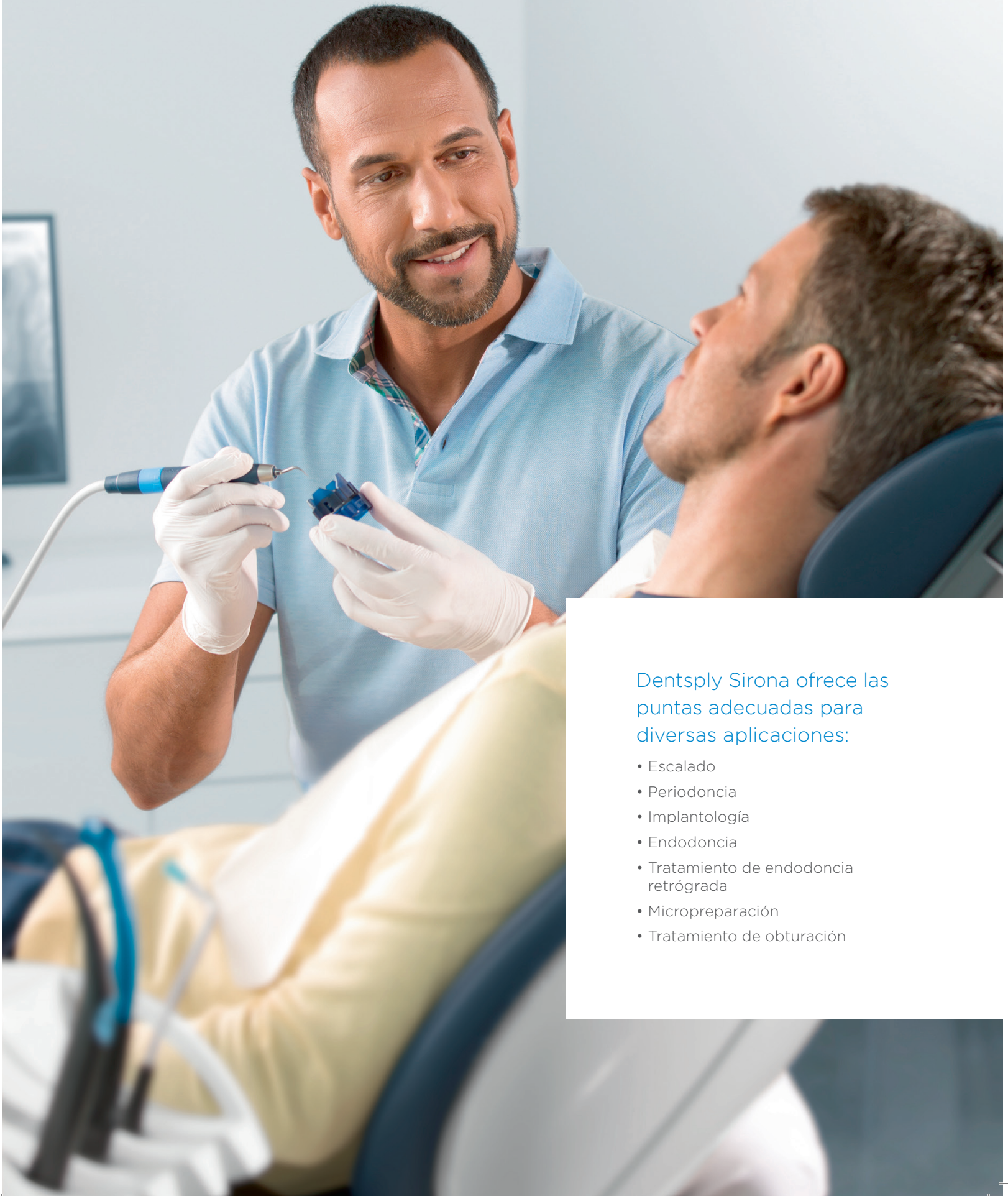

Dentsply Sirona ofrece las puntas adecuadas para diversas aplicaciones:

- Escalado
- Periodoncia
- Implantología
- Endodoncia
- Tratamiento de endodoncia retrógrada
- Micropreparación
- Tratamiento de obturación

La gran eficacia de puntas de alta calidad




Pequeñas pero fundamentales

Prácticamente todas las puntas de Dentsply Sirona se adaptan a todos los escaladores ultrasónicos que ofrece la empresa. Con independencia de la serie y del año de fabricación. Para ello otorgamos una atención especial en cada proceso de desarrollo. Esto concierne a: SiroSon S, SiroSon L, SiroSonic, SiroSonic L, SiroSonic TL, PerioSonic.

Excelente calidad

La altísima calidad de las puntas de Dentsply Sirona es indiscutible. En su fabricación sólo se emplea acero fino de alto temple, mecanizado y templado en estricta conformidad con el proceso de templado acreditado de Dentsply Sirona. Además, también establecemos continuamente nuevos estándares en términos de calidad mediante el uso permanente de la más moderna tecnología de mecanizado CNC.

Productos

Tipos		Versiones	REF.
SiroSonic ¹		Sin luz, incl. Puntas nº 3L y nº 4L	59 13 517
SiroSonic L ¹		Con luz, incl. Puntas nº 3L y nº 4L	59 13 509
Juego SiroSonic L ¹		Con luz, 2 unidades	65 62 834
SiroSonic TL ²		Con luz, incl. Puntas nº 3L y nº 4L	62 12 216
Juego SiroSonic TL ²		Con luz, 2 unidades	65 62 842
PerioSonic		Con luz y anillo de señalización	60 30 410

¹ Adecuado para Intego e Intego Pro

² Adecuado para las unidades de tratamiento Teneo y Sinuis



Accesorios para el escalador

Accesorios		Aplicación	REF.
Adaptador de spray L		Para SiroSon L y SiroSonic/SiroSonic L para la aplicación de líquidos de limpieza externos	60 02 286
Adaptador de spray PerioSonic		Para SiroSonic TL y PerioSonic para la aplicación de líquidos de limpieza externos	61 41 852
Llave dinamométrica		Para fijar de forma segura la punta en la pieza de mano	60 06 196

Datos técnicos

Datos técnicos	PerioSonic SiroSonic SiroSonic L SiroSonic TL
Fuerza de accionamiento	Piezoeléctrica
Forma de oscilación	Lineal
Frecuencia de oscilación [kHz]	~ 25-32
Iluminación anular*	LED
Ø Pieza de mano [mm]	máx. 18
Ø en el asa [mm]	~ 12 / ~ 18
Longitud de la pieza de mano [mm] (sin punta del instrumento)	~ 96 / ~ 101
Peso [g]	~ 47 / ~ 50

* No para SiroSonic.




Periodoncia

Para eliminar concreciones en la región subgingival incluso en bolsas periodontales profundas. SiroPerio permite el mejor acceso posible a todas las áreas para eliminar eficientemente las concreciones sin dañar la sustancia dental. Máxima comodidad gracias a una buena accesibilidad, incluso en bifurcaciones.

Accesorios		Aplicación	REF.
SiroPerio PE1* filigrana y recta		Para limpieza de raíces y enjuague en bolsas periodontales profundas	60 44 825
SiroPerio PE2* Curvada hacia la derecha		Para limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas de la zona de los dientes laterales	60 44 833
SiroPerio PE3* Curvada hacia la izquierda		Para limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas de la zona de los dientes laterales	60 44 841
SiroPerio 4 PS* Recta		Para la detección y la limpieza radicular en bolsas periodontales profundas con PerioScan	61 77 005
SiroPerio PE5* Curvada hacia la derecha		Para limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas de la zona de los dientes laterales	63 43 078
SiroPerio PE6* Curvada hacia la izquierda		Para limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas de la zona de los dientes laterales	63 43 086

Endodoncia

Para el enjuague de conductos radiculares en los cuales se ha aplicado previamente hipoclorito de sodio. La oscilación de ultrasonidos intensifica la acción del líquido de enjuague permitiendo que penetre en los capilares.

Accesorios		Aplicación	REF.
Punta de endodoncia n.º 5 solo para SiroSon L, SiroSonic L/TL y PerioSonic		Para el enjuague de los canales radiculares con NaOCl	60 02 310





Tratamiento de obturación

Para la colocación cuidadosa y segura de inlays.

Accesorios		Aplicación	REF.
Juego CEM n.º 6L* (1 punta CEM n.º 6L, 2 suplementos de contacto para inlays)		Para la colocación de inlays cerámicos (p. ej. CEREC) con composites tixótrpos	18 94 307
Aditamento de contacto		Para punta CEM n.º 6L, 10 unidades para inlays	18 94 372

Micropreparación





Instrumentos diamantados selectivamente con borde biselado a 20° para la preparación mínimamente invasiva y el tratamiento adhesivo de pequeñas cavidades interproximales. El spray refrigerante se aplica directamente en el área de la preparación. El contra-ángulo permite un acceso universal a todos los cuadrantes con sólo dos puntas por tamaño.

Accesorios		Aplicación	REF.
SiroPrep M1* pequeño		Mesial	59 04 276
SiroPrep D1* pequeño		Distal	59 47 309
SiroPrep M2* Estándar		Mesial	59 47 358
SiroPrep D2* Estándar		Distal	59 47 366

* Incluye llave dinamométrica.


Tratamiento de endodoncia retrógrada

Puntas adiamantadas selectivamente para la resección retrógrada de los ápices reticulares. Para lograr un acceso más cómodo a la zona de tratamiento, las puntas están acodadas aprox. 20° (a la derecha o a la izquierda).

Accesorios	Aplicación	REF.
SiroRetro KR* Corta, acodada hacia la derecha	 Para el maxilar inferior izquierdo o el maxilar superior derecho	54 57 895
SiroRetro KL* Corto, a la izquierda acodado	 Para el maxilar inferior derecho o el maxilar superior izquierdo	54 57 887
SiroRetro GR* Grande, acodado hacia la derecha	 Para el maxilar inferior izquierdo o el maxilar superior derecho	54 57 911
SiroRetro GL* Grande, a la izquierda acodado	 Para el maxilar inferior derecho o el maxilar superior izquierdo	54 57 903

Implantología

Excelente gestión de la biopelícula y limpieza suave de los implantes y de las restauraciones metálicas y de cerámica. El recubrimiento de plástico de la pieza de limpieza trabaja suavemente sobre las delicadas superficies y proporciona una limpieza óptima y suave.

Accesorios	Aplicación	REF.
SiroImplant IP1 solo para SiroSon L, SiroSonic/L/TL y PerioSonic	 Limpieza de implantes y restauraciones metálicas y cerámicas	63 43 052
Aplicación de IP1 para SiroImplant IP1	Volumen de suministro: 5 unidades	63 43 094

Escalado

Diversas variantes de puntas para todas las fases del detartraje supragingival.

Accesorios	Aplicación	REF.
Punta n.º 1L*	 Para la limpieza, superficial, lingual y bucal	89 24 250
Punta n.º 2L*	 Versátil, uso lingual, bucal y proximal	89 24 268
Punta n.º 3L*	 Uso universal (para diestros y zurdos), subgingival e interdental	18 94 455
Juego n.º 3L* (2 uds)	véase Punta n.º 3L	64 12 451
Juego n.º 3L* (6 uds)	véase Punta n.º 3L	65 41 044
Punta n.º 4L*	 Universal, ideal para superficies dentales supragingivales y subgingivales y para la región interdental	18 94 463
Juego n.º 4L* (2 uds)	véase Punta n.º 4L	64 12 469
Juego n.º 4L* (6 uds)	véase Punta n.º 4L	65 41 051

* Incluye llave dinamométrica.

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

