


roeko

Surgitip CÁNULAS DE ASPIRACIÓN

La familia para una aspiración precisa en
cirugía y endodoncia

COLTENE

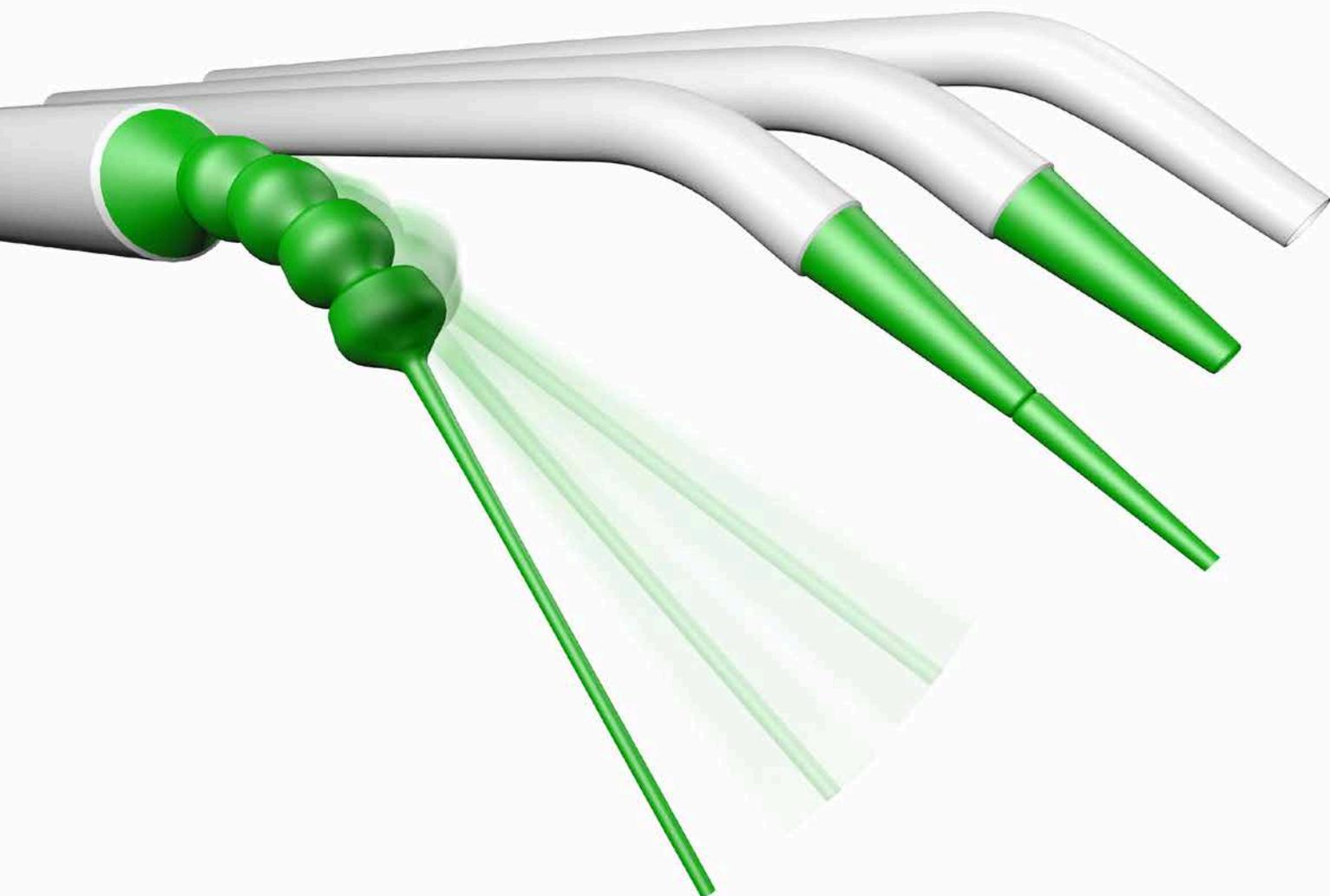

roeko

Surgitip

Las cánulas de aspiración Surgitip han demostrado que ayudan a secar la zona de tratamiento bucal en la cirugía mínimamente invasiva y en la aspiración de partículas. Las puntas de aspiración de plástico permiten una aspiración extremadamente precisa, ya que la forma y el diseño se han desarrollado específicamente para trabajar bajo un microscopio o una lupa. Las puntas son ideales por su manipulación higiénica y su facilidad de uso.

- La punta verde crea un excelente contraste para una aspiración precisa
- Zona de visión abierta gracias a su forma estrecha y a la punta cónica
- Higiénica y rápida de usar, ya que está estéril, embalada individualmente y lista para su uso inmediato
- Diversos diámetros de aspirador para una amplia variedad de tratamientos


roeko

Surgitip-endo

Surgitip-endo es una cánula de aspiración especialmente diseñada para secar el canal radicular. El innovador diseño de la punta de succión permite una flexibilidad multidireccional, de forma que se puede introducir fácilmente en canales radiculares de difícil acceso sin tener que doblar la Canal Tip. La aspiración resulta extremadamente eficaz en todos los ángulos, y la visibilidad no está restringida.

Surgitip-endo elimina de forma rápida y eficaz las soluciones de irrigación y la humedad, acortando el tiempo de secado considerablemente. Son necesarias menos puntas de papel. Sin embargo, se recomienda utilizar puntas de papel para comprobar que el canal esté completamente seco.

- Punta especialmente diseñada para la flexibilidad multidireccional
- Aspiración eficaz y buena accesibilidad del canal
- Canal Tip ISO 60, diámetro interior 0,35 mm
- Estéril, embalada individualmente y lista para su uso inmediato

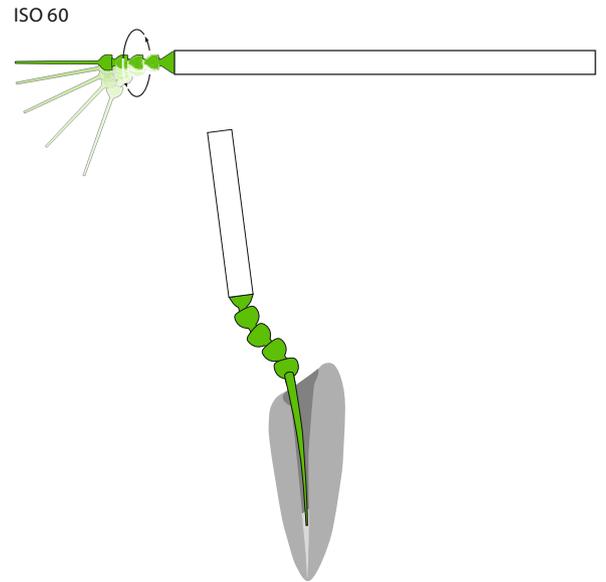

roeko

Surgitip-micro


Con su abertura de punta de 1,2 mm, Surgitip-micro brinda aspiración y precisión durante las intervenciones microquirúrgicas. La punta ofrece una buena sujeción y es fácil de manipular, por lo que permite la aspiración dirigida en las zonas de trabajo dental con restricciones. Surgitip-micro es estéril, está embalada individualmente y lista para su uso inmediato.



roeko

Surgitip


Surgitip se utiliza para intervenciones quirúrgicas que requieran una mayor capacidad de aspiración. Está disponible con aberturas de punta de 2,5 mm y 4,8 mm. La punta de 4,8 mm consta del tubo aspirador doblado sin la punta verde. Surgitip es estéril, está embalada individualmente y lista para su uso inmediato.

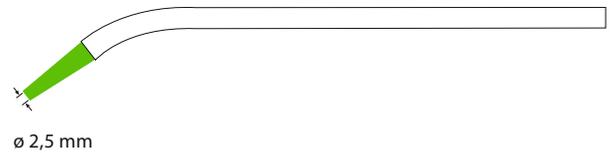

roeko

Cánulas de aspiración

Las puntas de aspiración de plástico no estériles son ideales para la aspiración durante las intervenciones no quirúrgicas. Su longitud y su forma se corresponden con las de Surgitip estéril de 4,8 mm. Las puntas de aspiración están disponibles en envases a granel de 100 unidades.

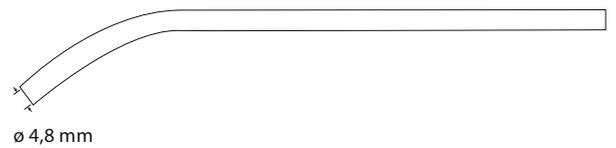


roeko

Adaptador doble

El adaptador doble puede utilizarse para conectar cualquier cánula de aspiración ROEKO a un sistema de aspiración estándar con abertura final de \varnothing 11 mm o \varnothing 16 mm. El adaptador doble es reutilizable y puede esterilizarse en el autoclave o quemiclave a temperaturas de hasta 134 °C.

\varnothing 11 mm


\varnothing 16 mm

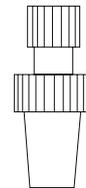

roeko

Concorde II

Recomendamos Concorde II para aspiración universal. La punta de aspiración de plástico aparta suavemente la lengua y el carrillo mientras aspira grandes volúmenes. La punta hecha de plástico de alta calidad es reutilizable y puede esterilizarse en el autoclave o quemiclave a temperaturas de hasta 134 °C.

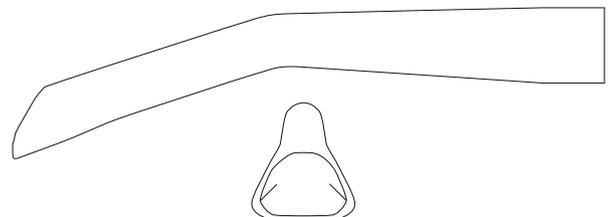


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	∅ Abertura de la punta	∅ Abertura final	Contenidos	REF
Surgitip-endo	0,35 mm	6,5 mm	20 uds.*	6001 8280
Surgitip-micro	1,2 mm	6,5 mm	20 uds.* 100 uds.**	462 012 462 013
Surgitip	2,5 mm	6,5 mm	20 uds.* 100 uds.**	462 025 462 026
	4,8 mm	6,5 mm	20 uds.* 100 uds.**	462 048 462 049
Cánulas de aspiración	4,8 mm	6,5 mm	100 uds.*	461 048
Concorde		11 mm 16 mm	10 uds.*** 10 uds.	450 211 450 216
Adaptador		11 mm 16 mm	1 1	463 025 463 011
Adaptador doble		11 + 16 mm	1 set	463 000

* incl. 1 Adaptador doble | **incl. 5 Adaptador doble | ***incl. 1 Adaptador



© COLTENE – www.coltene.com

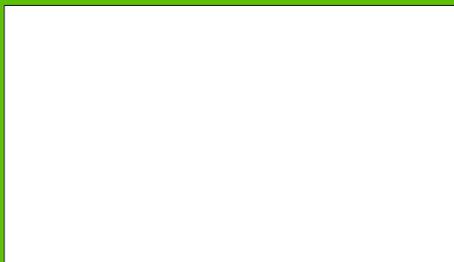

Coltene Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

COLTENE